

restifem nedir

restifem®, silikondan yapılmış bir vajinal destek peseridir.


Uygulama alanı

İster genç bir anne, isterse olgun bir kadın tarafından kullanılsın - peser, stres üriner inkontinans veya prolaps semptomlarını hafifletebilir ve önleyici ve tedavi edici özelliklere sahiptir. restifem®, bir doğum sonrası pelvik tabanın bağ dokusunu (özellikle uterusun destekleyici yapısını ve üriner kontinans kontrol sistemini) rahatlatır ve bu sayede geri çekilmesini destekler.

Kullanım talimatları

Doğum izleyen iki hafta boyunca süren vajinal akıntının tamamlanmasından sonra en az 3-6 ay veya emzirme ya da pelvik taban şikayetleri olduğu sürece kullanın.

Sabah yerleştirin,
gece çıkarın
ve temizleyin.

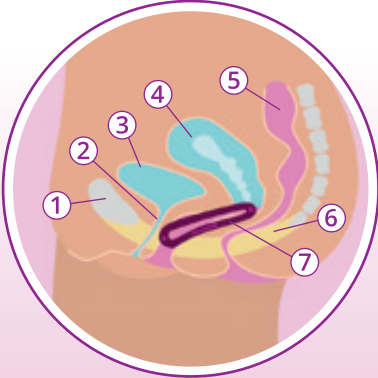

- 1 Kasık kemiği
- 2 Üretra
- 3 Mesane
- 4 Uterus
- 5 Rektum
- 6 Pelvik tabanı
- 7 restifem®

restifem'i nereden alabilirim

restifem®, online mağazamızda mevcuttur:
www.restifem-shop.com

E-posta ile sipariş verilmesi de mümkündür:
info@restifem.com

Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:

www.restifem.com

small



Boyutlar

Uzunluk: 7,0 cm
Genişlik, ön: 3,0 cm
Genişlik, arka: 4,0 cm
Ürün no.: R011S

medium



Boyutlar

Uzunluk: 8,0 cm
Genişlik, ön: 3,5 cm
Genişlik, arka: 4,5 cm
Ürün no.: R011M

set

(1 small, 1 medium)

Ürün no.: R011Set

Doğrudan satınalma:

VIOMED Vertriebs GmbH
Berliner Straße 90
14797 KLOSTER LEHNIN
ALMANYA
Fax: +49 (0) 3382 7042 81
E-Mail: info@restifem.com
Web: www.restifem.com
Shop: www.restifem-shop.com

restifem®
back to balance



**Peser tedavisinde
yenilik**

VIOMED

VIOMED

Pelvik tabanda yenilik

Önleyici etki


Hamilelik ve doğum, aşırı genişlemeye ve hatta bazen pelvik taban bağ dokusunda hasara ve ayrıca pelvik taban kaslarına aşırı yüklenmesine neden olur. Her ikisi de destek peser ile tedavi edilerek rahatlatılır ve böylece gerileme süreci desteklenir. Optimal gerileme, pelvik tabanın daha sonraki fonksiyonel sınırlanma riskini azaltabilir. Kadınlar, vajinal doğum ve sezaryen sonrası peser kullanabilir.



Tedavi edici etki

Stres üriner inkontinansı (istem dışı idrar çıkışı) ve/veya desensusu (özellikle uterus prolapsı, vajinal desensus) olan tüm kadınlar aleti kullanarak bu durumları hafifletebilir hatta iyileştirebilir. Peser, uterusu düzeltir ve mesane ile üretrayı destekler.

Önleme ve tedavi

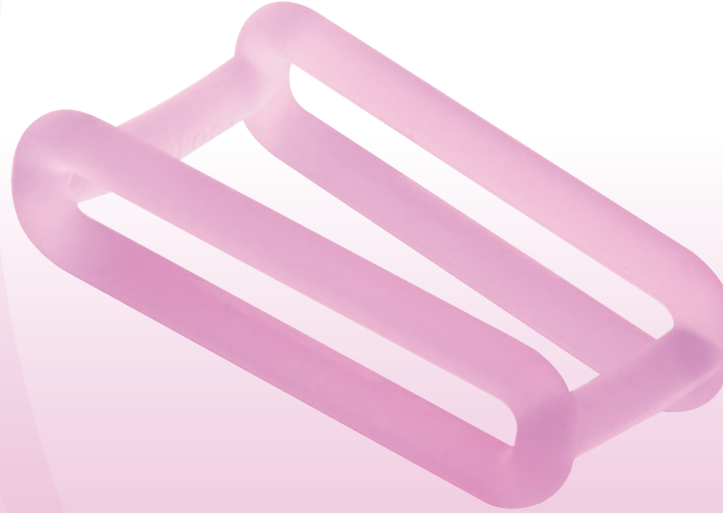

Doğum sonrası gerileme süreçlerini destekler

Pelvik taban bağ dokusunu rahatlatır ve stabilize eder

Pelvik taban kaslarını rahatlatır

Desensus ve stres üriner inkontinans için tedavi sağlar

Retrosimfizyal destek mekanizması

Vajinanın anatomisine ve konfigürasyonuna göre adapte edilmiş peser şekli

Kullanıcı için uygulaması kolaydır