

Hva er restifem

restifem® er et vaginalt støttepessar laget av silikon.


Bruksområde

Uansett om den brukes av en ung mor eller en moden kvinne – pessaret kan lindre symptomene på stressurininkontinens eller prolaps, og har forebyggende og terapeutiske egenskaper. Etter fødsel avlaster restifem® bindevevet i bekkenbunnen (spesielt støtteapparatet til livmoren og urinkontinenskontrollsystemet) og fremmer dermed dets tilbaketrekking.

Instruksjoner for bruk

Bruk etter fødsel etter avsluttet renselse i minst 3-6 måneder eller så lenge man ammer eller man har bekkenbunnsproblemer.

Sett inn om morgenen, fjern og rengjør før natten.

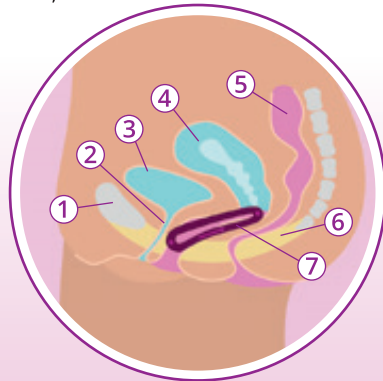

- 1 Skambein
- 2 Urinrør
- 3 Blære
- 4 Livmor
- 5 Rektum
- 6 Bekkenbunn
- 7 restifem®

Hvor får jeg tak i restifem

restifem® er tilgjengelig i vår nettbutikk:
www.restifem-shop.com

Bestilling på e-post er også mulig:
info@restifem.com

For mer informasjon besøk:

www.restifem.com

small



Dimensjoner

Lengde: 7,0 cm
Bredde (foran): 3,0 cm
Bredde (bak): 4,0 cm

Varenr.: R011S

medium



Dimensjoner

Lengde: 8,0 cm
Bredde (foran): 3,5 cm
Bredde (bak): 4,5 cm

Varenr.: R011M

set

(1 small, 1 medium)

Varenr.: R011Set

Direkte kjøp og rådgiving:

VIOMED Vertriebs GmbH
Berliner Straße 90
14797 KLOSTER LEHNIN
TYSKLAND
Fax: +49 (0) 3382 7042 81
E-Mail: info@restifem.com
Web: www.restifem.com
Shop: www.restifem-shop.com

restifem[®]
back to balance

**Innovasjon
innen pessarterapi**

VIOMED

VIOMED

Bekkenbunnsinnovasjonen

Preventiv effekt

Graviditet og fødsel forårsaker overstrekk og noen ganger til og med skade på bekkenbunnens bindevev, samt overbelastning av bekkenbunnsmuskulaturen. Begge lindres gjennom behandling med støttepessaret, som støtter restitusjonsprosessen. Optimal restitusjon kan redusere risikoen for senere funksjonsbegrensninger av bekkenbunnen. Kvinner kan bruke pessaret både etter en vaginal fødsel og etter keisersnitt.


Støtter restitusjonsprosessene etter en fødsel

Avlaster og stabiliserer bindevevet i bekkenbunnen

Avlaster bekkenbunnsmuskulaturen

restifem[®]
back to balance

Prevensjon og behandling

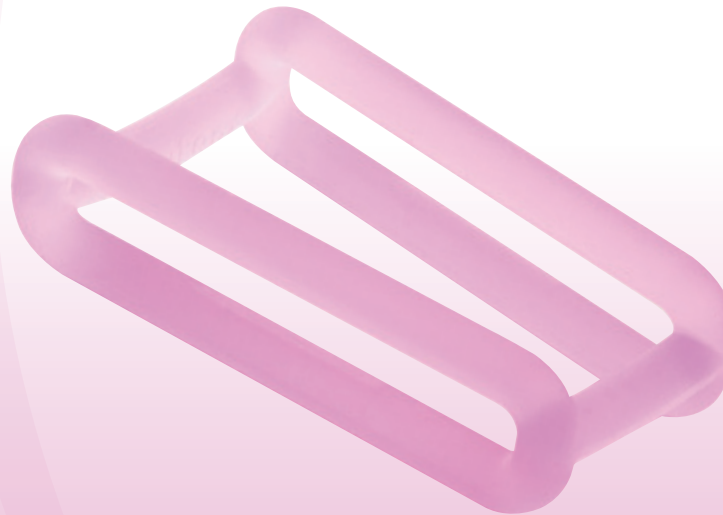

Enkel å håndtere for brukeren

Terapeutisk effekt

Hos kvinner som lider av stress-urininkontinens (ufri-villig vannlating) og/eller prolaps (spesielt prolaps av livmor, vagina), kan disse symptomene lindres eller elimineres ved å bruke enheten. Pessaret retter ut livmoren og støtter blæren og urinrøret.

Gir behandling for livmorfremfall og stressurininkontinens

Støttemekanisme bak symfyen

Pessarformen er tilpasset skjedens anatomi og konfigurasjon.